

PRECAUTIONS DE STOCKAGE AU DOMICILE



- Dans une pièce aérée et propre
- T° entre 10°C et 30°C
- En position verticale, attachée dans son chariot, sinon à l'horizontal protégée des risques de chocs et de chute
- Éloignée de toute source de chaleur
- **Interdit de fumer à proximité**
- interdit d'utiliser à proximité de substance inflammable (ex : spray)



L'expertise des soins complexes
et coordonnés à domicile

UTILISATION PRATIQUE DE LA BOUTEILLE DE MEOPA

CONSEILS DE SECURITE PENDANT ET APRES LE SOIN



L'expertise des soins complexes
et coordonnés à domicile



DEROULEMENT DU SOIN

Dans une pièce aérée, le patient doit être en position couché ou semi couché et s'il le peut, tenir son masque lui-même sinon demander à l'entourage.

Enlever l'opercule de sécurité et brancher le tuyau raccord MEOPA sur la bouteille (PRISE OLIVE).

Assembler le kit d'administration selon le schéma.

Ouvrir le robinet en position I (ouvert). Ne jamais se placer face à la sortie du robinet.

Régler le débit avec le sélecteur de débit, selon la prescription.

Attendre que le ballonnet soit gonflé avant d'administrer.

Appliquer le masque sur le visage, le patient doit respirer régulièrement et tranquillement. Le visage est sans trace de corps gras (ex : crème...).

Vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau du masque.


Attendre 3 min avant de débuter le soin (délai minimum d'action du MEOPA).

Maintenir la communication avec le patient tout au long du soin pour surveiller sa vigilance.

L'administration doit être immédiatement interrompue en cas de perte du contact.

Durant le soin s'assurer que le ballon reste toujours gonflé, les oscillations correspondant aux mouvements respiratoires.

Le traitement ne doit pas excéder 1 heure par jour pendant 15 jours avec une fenêtre thérapeutique de 24H à l'issue des 15 jours.

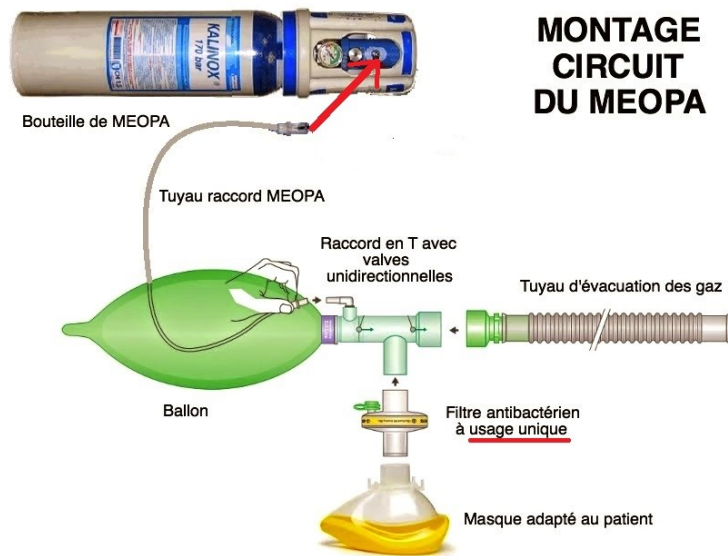

APRES LE SOIN

Ramener le sélecteur de débit en position de fermeture ainsi que le robinet de la bouteille.

Vérifier la pression restante pour renouvellement éventuel de la bouteille.

Mettre un opercule de sécurité jaune sur la bouteille de MEOPA pour éviter tout mésusage au domicile.

Tracer le soin dans le DPA en complétant la fiche de suivi administration MEOPA

Après chaque utilisation

Jeter le filtre à usage unique.



Laver le masque à l'eau savonneuse puis le sécher



Après 15 utilisations* :

jeter le kit ballon + tuyau d'évacuation



* en cas d'infection bactérienne ou virale de la sphère ORL ou pulmonaire, les précautions suivantes sont à appliquer :

- Jeter le masque après chaque utilisation dans le conteneur à déchets d'activité de soins à risques infectieux (DASRI) prévu à cet effet ;
- Désinfecter après chaque utilisation avec des lingettes adaptées la partie réutilisable du kit (zone en plastique vert de la valve unidirectionnelle inspiration/expiration), ainsi que le ballon.